

# DryMax Non Sterile

Absorbest DryMax Non Sterile är ett följsamt och superabsorberande förband för vätskande sår. Förbandet absorberar och behåller vätskan inuti förbandet. Sårexsudat absorberas vertikalt i förbandet och förvandlas till en gel, vilket minskar risken för maceration. Förbandet känns torrt och behagligt för patienten.

DryMax Non Sterile ska användas som ett sekundärt sårförband. Det har en enkel design med absorption från båda sidor vilket omöjliggör felanvändning. Denna egenskap gör även förbandet staplingsbart, så att flera förband kan placeras ovanpå varandra om extra hög absorptionskapacitet skulle krävas.


Den hydrofila kontaktytan transporterar effektivt vätskan bort från primärförbandet. Vätskan fördelas jämnt in i förbandets kärna som bygger på vår DryMax-teknologi.

Förbandets supertunna och mjuka egenskaper gör att det passar på alla platser på kroppen. DryMax Non Sterile är utvecklad för att fungera väl tillsammans med kompressionsbehandling.


## Applikationsguide



Förbandet placeras i nära kontakt med ett passande primärförband.

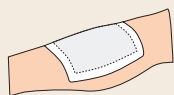

Fäst förbandet med bandage, film eller tejp.

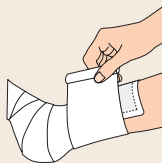

DryMax Non Sterile kan kombineras med kompressionsbehandling.


Produktnamn	Förbandsstorlek i cm	REF	Antal/fp	Absorptionskapacitet*
DryMax Non Sterile	10x10	F20011/200	200	50 ml
DryMax Non Sterile	10x22	F20021/100	100	150 ml
DryMax Non Sterile	20x22	F20041/100	100	300 ml
DryMax Non Sterile	20x30	F20051/75	75	400 ml
DryMax Non Sterile	37x56	F20071/10	10	1600 ml

\*) Enligt internationell standard EN 13726



- **Kostnadseffektiv**
- **Användarvänlig**
- **Ökad patientkomfort**
- **Förbättrad sårhäkning\***

\*jämfört med konventionella sårförband

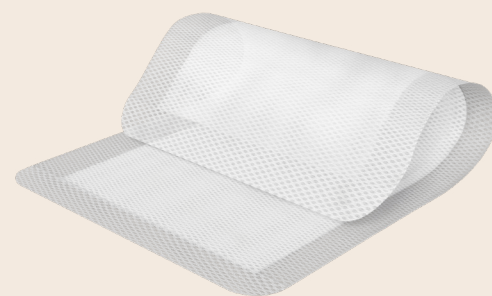

**DryMax®** technology