

DryMax Blue

DryMax Blue är ett sterilt, följsamt och superabsorberande förband för vätskande sår. DryMax Blue absorberar och behåller vätskan inuti förbandet. Sårexsudat absorberas vertikalt i förbandet och förvandlas till en gel, vilket minskar risken för maceration samtidigt som en fuktig sårhelingsmiljö bibehålls.


DryMax Blue förblir torrt och bekvämt för patienten. Samtidigt bidrar det till en fuktig sårhelingsmiljö. Förbandet har ett vitt hydrofilt sårkontaktsskikt som placeras mot såret. Det hydrofila kontaktsskiktet transporterar effektivt bort vätska från såret och fördelar den jämnt i förbandets kärna som är uppbyggd av vår DryMax-teknologi. Förbandet har en blå hydrofob baksida för att minska risken för genomslag av sårvätska.

Förbandets supertunna och mjuka egenskaper gör att det passar på alla platser på kroppen. Det sömlösa sårkontaktsskiktet förenklar placeringen över såret. DryMax Blue är utvecklad för att fungera väl tillsammans med kompressionsbehandling.


Applikationsguide



Förbandet placeras i nära kontakt med såret eller i kontakt med ett annat förband.

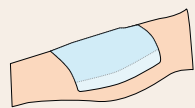

Fixera förbandet på lämpligt sätt med bandagelinda, film eller tejp.

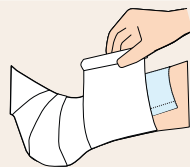


DryMax Blue kan användas tillsammans med kompressionsbehandling.

Produktnamn	Förbandsstl i cm	REF	Ant/fp	Absorptionsskapacitet*
DryMax Blue	11x10	F60093/10	10	125 ml
DryMax Blue	12.5x12.5	F60094/10	10	200 ml
DryMax Blue	11x20	F60095/10	10	310 ml
DryMax Blue	20x20	F60096/10	10	600 ml
DryMax Blue	20x30	F60097/10	10	910 ml

* Enligt internationell standard EN 13726

** Jämfört med konventionella sårförband

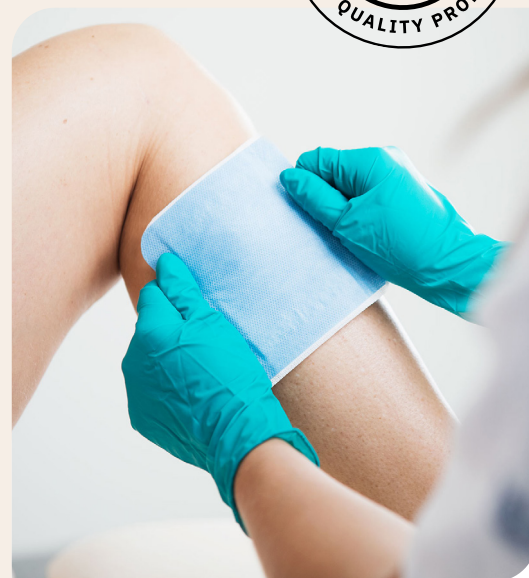

- **Kostnadseffektiv**
- **Användarvänlig**
- **Ökad patientkomfort**
- **Förbättrad sårhelning****



DryMax® technology